


GEOZON

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЁТКА LOTUS

4. Аккуратно взяв за ручку, двигайте зубную щётку по кругу под углом 45°. Равномерно перемещайте щёткой по всей полости рта. Щётка будет делать паузы примерно каждые 30 секунд для смены зоны полости рта. Не нажимайте слишком сильно и не трите.

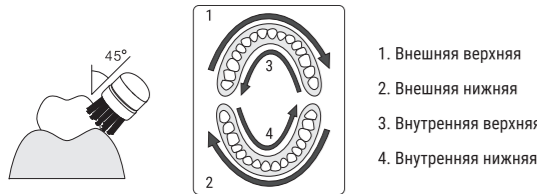

1. Внешняя верхняя
2. Внешняя нижняя
3. Внутренняя верхняя
4. Внутренняя нижняя

5. После завершения цикла чистки зубов прополощите рот, а также головку щётки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ЩЁТКИ

Согласно исследованиям, насадки щёток являются расходными материалами, и длительное использование одной и той же щётки приведет к увеличению количества микроорганизмов и бактерий между щетинками, которые вредны для полости рта.

Правильный метод чистки зубов имеет жизненно важное значение. Если слишком сильно нажимать на щётку во время чистки, щетина может повернуться вниз. Если слабо нажимать на щётку во время чистки, зубные щётки остаются совершенно новыми после использования в течение трех месяцев.

Все это связано с неправильным использованием зубных щёток, правильная прижимная сила чистки должна составлять около 100 грамм. Уход за головками щёток: нажатие на поверхность зубных щёток приводит к тому, что нижняя часть зубной щётки подвергается воздействию зубов и склонна к раздвоению. Щетина будет восстановлена при промывании горячей водой.

Нити для зубных щёток, которые мы используем, имеют мягкую щетину, устойчивы к раздвоению и выпадению щетины.

Благодарим Вас за приобретение нашей электрической зубной щётки GEOZON LOTUS. Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы снизить риск несчастного случая, поражения электрическим током, травм, пожара, смерти, а также повреждения имущества, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Данное изделие содержит аккумуляторную батарею, которую нельзя бросать в огонь или нагревать. Не заряжайте, не используйте и не храните устройство при высокой температуре, в противном случае это может привести к перегоранию, возгоранию или взрыву.
- Перед зарядкой устройства убедитесь, что USB-кабель и устройство сухие. Не используйте зарядный кабель, отличный от оригинального зарядного кабеля. Кроме того, не используйте поврежденный зарядный кабель для зарядки других устройств, в противном случае это может привести к ожогам или возгоранию из-за короткого замыкания.
- Не заряжайте устройство более 24 часов. Несоблюдение этого требования может привести к ухудшению характеристик аккумулятора.
- Не используйте зубную щётку во время зарядки.
- Не погружайте зубную щётку в воду или другие жидкости на длительное время.
- Зубная щётка подходит для людей старше восемнадцати лет и не подходит для детей и подростков.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с устройством и его частями, что может привести к опасностям и привести к несчастному случаю или травме.
- Это устройство предназначено только для чистки зубов, десен и языка. Не используйте его для других целей.
- Не рекомендовано для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний (включая детей).
- Лица, страдающие тяжелыми заболеваниями зубов, имевшие

2

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Насадка щётки

Ополаскивайте головку щётки и щетину после каждого использования, дайте им высохнуть естественным путём. По мнению стоматологов, необходимо заменять насадки щётки каждые три месяца.

Корпус зубной щётки

Промойте корпус зубной щётки и дайте ей высохнуть естественным путем. Не замачивайте его в воде в течение длительного времени. Не мойте водой с температурой выше 40° или кислотным моющим средством.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Зубная щётка не заряжается. Убедитесь, что зарядное устройство подключено к электрической сети.

Зубная щётка не работает или ее вращения слишком медленные. Возможно, разрядилась батарея. Зарядите батарею с помощью зарядного устройства не менее 6 часов.

Зубная щётка не работает даже после зарядки. Убедитесь, что зубная щётка правильно установлена в USB порт для зарядки и индикатор горит красным. В противном случае обратитесь в сервис.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Соблюдайте действующие предписания вашего региона, используйте сборные пункты по утилизации отслуживших электронных приборов. Такой подход поможет сохранить здоровье людей и окружающую среду.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим регламентам Таможенного союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.

7

заболевания зубов в анамнезе или подозревающие заболевания полости рта, должны проконсультироваться с врачом перед использованием, в противном случае это может привести к повреждению зубов или десен.


- Регулярно проверяйте насадку щётки на наличие трещин, деформаций.
- Каждая насадка щётки предназначена только для индивидуального использования. Не делитесь своей насадкой с членами своей семьи или другими людьми.
- Зубная паста часто содержит перекись водорода, пищевую соду или другой бикарбонат, используемый в отбеливающих зубных пастах. Очищайте головку щётки чистой водой и мойте ручку водой с мылом после каждого использования, чтобы предотвратить растрескивание ручки. Каждые две недели промывайте соединение щётки с насадкой.
- Если на зубной щётке (насадке, ручке) появились повреждения, трещины или деформации, прекратите её использование.
- Регулярно протирайте зубную щётку насухо и храните в вертикальном положении.
- Зубная щётка – это технически сложное устройство, пользователям нельзя самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство, если оно не работает, вместо этого необходимо обратиться в службу послепродажного обслуживания.
- Людям с низкой чувствительностью полости рта не следует пользоваться этой зубной щёткой. Не прижимайте щётку сильно к зубам или дёснам и не давите щёткой в течение длительного времени в одном месте. В противном случае это может привести к повреждению зубов и дёсен.
- Не используйте посудомоечную машину или микроволновую печь для мойки и сушки зубной щётки.

3

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВАШИМ ВРАЧОМ

- Если за последние 2 месяца у вас были операции на полости рта.
- Если у вас кровоточат десны после 1 недели использования зубной щётки.
- Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу медицинского обслуживания.
- Если вы почувствуете какой-либо дискомфорт или боль, прекратите использование и обратитесь к вашему врачу.
- Если в вашем организме установлен кардиостимулятор или любое другое имплантированное устройство, проконсультируйтесь с вашим врачом перед использованием. Устройство соответствует стандартам безопасности для электромагнитного оборудования.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

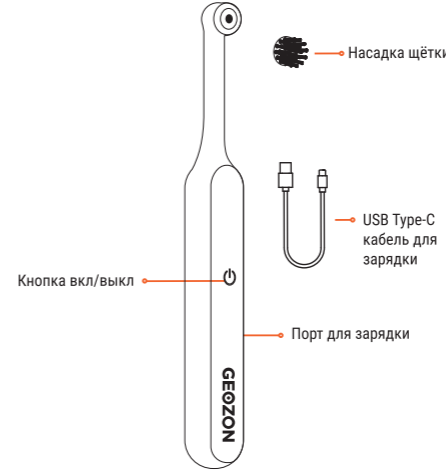

4

2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Замена изделия в период гарантийного срока не ведёт к установлению нового гарантийного срока.
4. Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:
 - а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
 - в. Если изделие имеет следы попытки ремонта;
 - г. Если дефект вызван изменением конструкции и схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем или использованием с другими изделиями;
 - д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умысленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
 - е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
 - ж. На расходные материалы склонные к износу: чистящие насадки, зарядный кабель, аккумуляторы, защитные покрытия и т. д.;
 - з. Косметические повреждения, включая помимо прочего царапины, вмятины и сломанные детали;
 - и. Обычный износ, включая трещины, царапины, потертости, изменение или потерю цвета.
5. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый продукцией GEOZON людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умысленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, утраты данных и информации.

4

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Lotus
Аккумулятор	Li-ion (500 мАч)
Электропитание	5В, 2А
Время зарядки	3 часа
Максимальная частота	3600 вращений/мин.
Кол-во режимов работы	2
Влагозащита	IPX7
Комплект поставки	Зубная щётка, 4 насадки, USB кабель, инструкция пользователя


4

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА


- Перед первым использованием, пожалуйста, полностью зарядите устройство.
- Подключите зубную щётку к зарядному устройству (5В/2А) используя USB-кабель.
- Во время зарядки устройства загорится красный индикатор заряда.
- При достижении полной зарядки батареи загорится зеленый индикатор заряда.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Аккуратно надавите насадкой щётки на стержень до упора и зафиксируйте его в соответствии с картинкой.

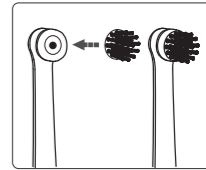

2. Нанесите небольшое количество зубной пасты на головку щётки и смочите щетину.
3. Слегка нажмите кнопку включения, чтобы включить зубную щётку и начать чистить зубы. Важно: для исключения забрызгивания включайте и используйте щётку во рту!
4. Повторно нажмите кнопку включения, чтобы переключить скорость чистки. Выберите наиболее подходящую в данный момент скорость.

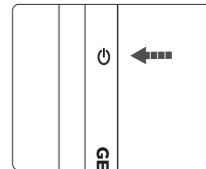

5

© 2023 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (САН ХЕ МИНГ КО., Лимитед)
Адрес: 11/F. AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/Ф. AXA Центр, 151 Глоучестер, Ванчай, Гонконг, КНР.)

Импортер: ООО «Трейд-Импорт»
Адрес: 108831, Россия, город Москва, город Щербинка, Остафьевское шоссе, дом 2, офис 405

Уполномоченная изготовителем организация: ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД»
Адрес: 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Контакты техподдержки: 88002228048, support@geozon.ru.
geozon.ru
Произведено в КНР.



GEOZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА: _____

9

6

10